

FL8-BGU-MH 规格

荧光附件主机	最多可配置 8 个荧光通道，转盘式荧光切换方式，12V5A 电源适配器，配有荧光挡板		
	光源	标配 15W 大功率 LED 光源，寿命 30000 小时以上	
	常用荧光通道	荧光激发通道	参数
		紫外带通 UA	EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm
		蓝色带通 BA	EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm
		绿色带通 GA	EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm
电源箱	荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整，具体请咨询本公司		
	3.5 英寸液晶屏控制器，12V 安全电压输入。		



正置八孔 LED 荧光附件
FL8-BGU-MH

八孔荧光通道独立控制

采用 15W 大功率 LED 光源，使用寿命长，人工维护成本低。

3.5 英寸触控液晶屏控制通道和亮度调节。


安装简单，无需调节光路，即开即用，开机无须预热。

荧光通道独立显示，亮度可调节，屏幕显示强度柱状图。

具有光强记忆功能，每个通道的亮度可以独立控制。

支持用户自己快捷拆卸和安装荧光通道，安装后无需调节即可使用。


灵活适配多品牌型号升级荧光

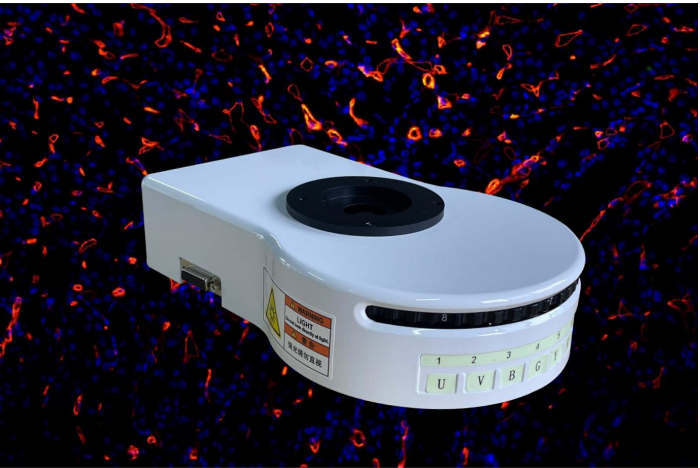

兼容蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康、耐可视、麦克奥迪等品牌显微镜的无限远光学系统，支持通过荧光模块升级实现荧光成像功能。



通过荧光转盘轻松切换激发光进行荧光或明场观察，多种滤光片组可供选择；单个附件最多可搭配八组滤色片满足各种染料观察需求，方便快捷，提高工作效率，有效减少染料淬灭。

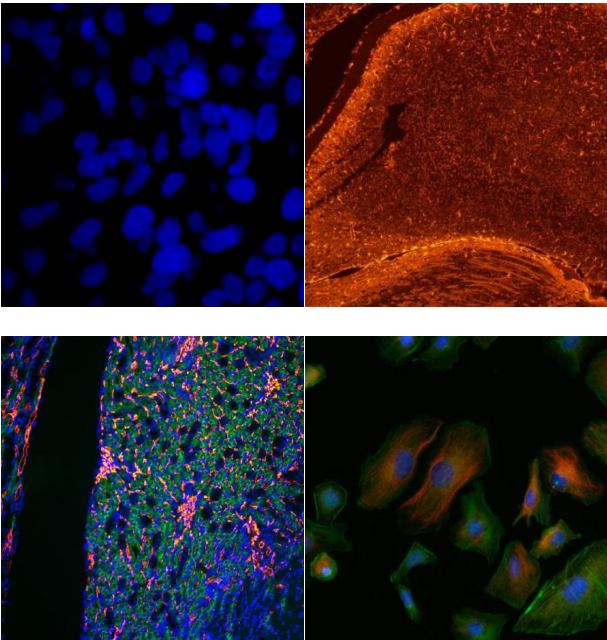

www.gzmhkj.com.cn



广州市明慧科技有限公司
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房
邮 编：510000
电 话：020-87096762
邮 箱：minghui88@163.com