

H6-LED-IMH 规格

|        |                                   |                                 |                                  |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 荧光附件主机 | 最多可配置六个荧光通道，转盘式荧光切换方式，12V3A 电源适配器 |                                 |                                  |
|        | 光源                                | 标配 10W 大功率 LED 光源，寿命 20000 小时以上 |                                  |
|        | 常用荧光通道                            | 荧光激发通道                          | 参数                               |
|        |                                   | 紫外带通 UA                         | EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm |
|        |                                   | 蓝色带通 BA                         | EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm |
|        |                                   | 绿色长通 G                          | EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP  |
| 电源箱    | 3.5 英寸液晶屏显示通道开关和亮度调节。             |                                 |                                  |



倒置六孔 LED 荧光附件  
H6-LED-IMH

六孔荧光通道切换独立控制


采用 10W 大功率 LED 光源，使用寿命长，人工维护成本低。  
支持用户自己快捷拆卸和安装荧光通道，安装后无需调节即可使用。




3.5 英寸液晶屏控制器控制通道和亮度调节。  
荧光通道独立显示，显示通道光学参数，完度可调节，屏幕显示强度柱状图。  
具有光强记忆功能，每个通道的亮度可以独立控制。  
通过拨动荧光转盘轻松切换激发光进行荧光或明场观察，多种滤光片组可供选择；单个附件最多可搭配六组滤色片满足各种染料的观察需求。



灵活适配满足不同需求的应用

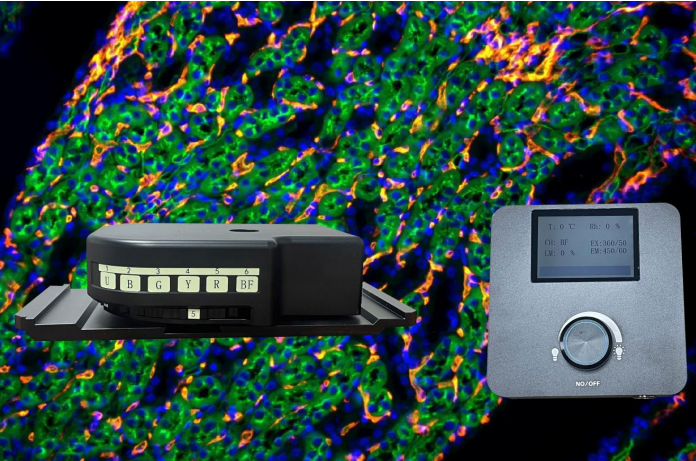

**兼容性能：**具有高度的兼容性和灵活性可以适应 Olympus IX73 系列倒置显微镜，用户可根据自己的需求进行选择 and 配置，满足不同研究领域的特殊要求。  
**应用领域：**适用于细胞结构观察、蛋白定位、药物筛选等基础研究；在神经发育、生殖道疾病、结核杆菌检测等医学研究中实现无串色成像，保障数据准确性；满足生物工程、生物制药及疾病预防等场景的定量荧光检测需求。

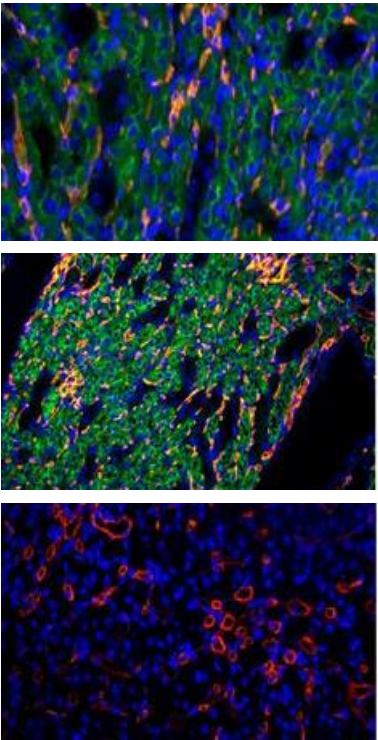

www.gzmhkj.com.cn



广州市明慧科技有限公司  
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房  
邮 编：510000  
电 话：020-87096762  
邮 箱：minghui88@163.com